


Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.

Audita Getting Started Guide

Audita is available in both FM and Digital configurations. Check which Audita version you have on the device itself.

Every Audita is shipped with batteries fully charged. The transmitters and receiver are already paired and channels pre-assigned. Your Audita is all ready to turn on and use straight out of the box!

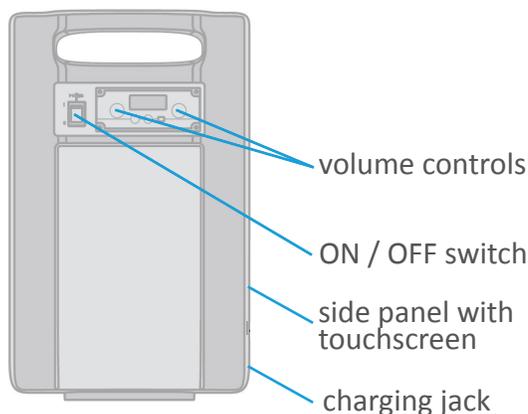

The main controls for Audita are on the front of the wireless receiver / speaker - these are all you need to use your system.

Switch the receiver / speaker ON and turn the two volume control units to a moderate setting. These will control the level of each microphone.

There are special controls and a charging jack on the side panel. External devices can be connected at the side panel too. Settings for external devices and other special settings are accessed through the side panel touchscreen.

audita wireless receiver / speaker

accessory microphones may be plugged into the jack here



built-in microphone works best about 20 cm from your mouth

press and hold for ON / OFF
press quickly to MUTE (red light) and UNMUTE (blue light)



press quickly to MUTE (red light) and UNMUTE (blue / green light) the switch on back of the transmitter / microphone

press and hold for ON / OFF

pendant transmitter / microphone


handheld transmitter / microphone

Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.

Audita – Guide de démarrage

Audita est disponible en format numérique ou MF. L'Information indiquant quelle version vous possédez apparaît sur l'appareil lui-même.

Chaque Audita est expédié avec des piles complètement chargées. Les émetteurs et le récepteur ont déjà été jumelés avec des canaux prédéfinis. Votre Audita est donc prêt à être allumé et à être utilisé dès sa sortie de son emballage!

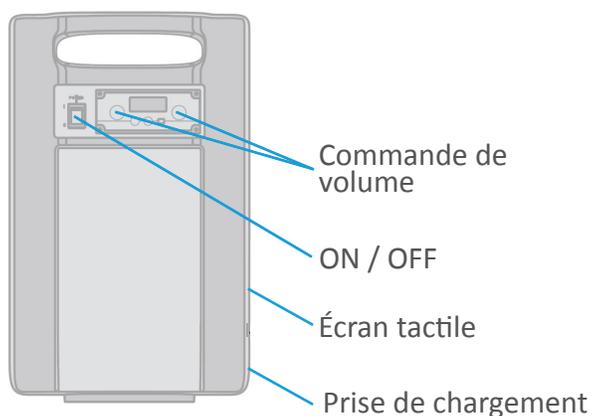

Les commandes principales de l'Audita se trouvent à l'avant du récepteur / haut-parleur. Elles constituent tout ce dont vous avez de besoin pour utiliser votre système.

Allumez le récepteur / haut-parleur et réglez les deux commandes de volume à un niveau modéré. Celles-ci régleront le volume de chaque microphone.

Sur le côté du récepteur / haut-parleur se trouve des commandes spéciales et une prise pour recharger l'appareil. Des appareils externes peuvent aussi être connectés sur le côté. Les paramètres pour les appareils externes et autres paramètres spéciaux sont accessibles sur l'écran tactile situé sur le côté du récepteur / haut-parleur.

Audita – récepteur / haut-parleur

Un microphone accessoire peut être connecté dans cette prise



Le microphone intégré est plus efficace lorsqu'utilisé à environ 20 cm de votre bouche

Appuyez sur la touche ON / OFF jusqu'à ce que le voyant soit rouge pour la SOURDINE ou bleu pour PARLER



Appuyez brièvement sur la touche derrière l'émetteur jusqu'à ce que le voyant soit rouge pour la SOURDINE ou bleu pour PARLER

Tenez enfoncé la touche ON / OFF

Émetteur pendentif / microphone

Émetteur à main / microphone